



# HydroTac<sup>®</sup>,




## Le nouveau pansement hydro-apaisant des laboratoires PAUL HARTMANN

Le pansement HydroTac<sup>®</sup>, apporte une réelle nouveauté sur le marché des pansements hydrocellulaires : **une structure unique pour une prise en charge simple et efficace des plaies**. Sa couche de contact avec la plaie est un réseau de gel hydratant et frais, disposé en nid d'abeille sur une mousse absorbante.

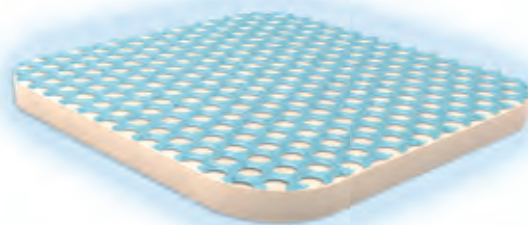

Technologie  
**AQUACLEAR<sup>®</sup>**



- ▶ Issu de la Technologie AquaClear<sup>®</sup>, le **gel hydratant** est composé de polyuréthane et de 45% d'eau. Frais, il procure une sensation d'apaisement dès son application et favorise un retrait sans douleur.
- ▶ En polyuréthane souple, avec alvéoles fines, la **mousse absorbante** a une capacité d'absorption rapide et une rétention élevée des exsudats. HydroTac<sup>®</sup> peut être associé à un traitement compressif. Il est conformable et protège contre la macération.
- ▶ Le **film semi-perméable**, en polyuréthane, a une haute perméabilité à la vapeur d'eau et permet les échanges gazeux. Il régule l'absorption des exsudats selon le type de plaie. Le film présente une barrière efficace contre les bactéries et les liquides.

Indiqué dans la prise en charge des plaies aiguës (brûlures, plaies traumatiques, dermabrasions) et chroniques (ulcères, escarres, pied diabétique) en phase de bourgeonnement et d'épidermisation, HydroTac<sup>®</sup> offre en outre une excellente **tolérance cutanée** et permet d'espacer le renouvellement des pansements.

### HydroTac<sup>®</sup>, existe en 2 versions :

**HydroTac<sup>®</sup>**, non adhésif, pour les peaux péri-lésionnelles fragilisées ou altérées, comme les ulcères de jambe ;




**HydroTac<sup>®</sup> Comfort**, avec pourtour adhésif, pour les peaux péri-lésionnelles saines.





**HARTMANN**
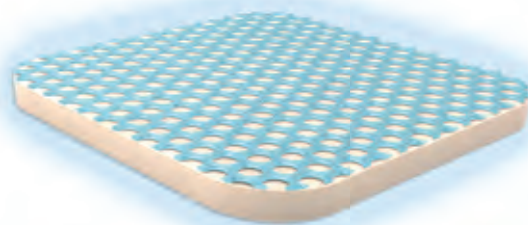
# HydroTac<sup>®</sup>,



Le nouveau pansement hydro-apaisant  
des laboratoires PAUL HARTMANN

Désignation	Dimensions totales	Dimensions du coussinet	Références	Nbre pièces / boîte	Code ACL	Prix LPPR*
 <b>HydroTac<sup>®</sup></b> Version non adhésive	12,5 cm x 12,5 cm		6858370	10	9629780	41,06 €
	15 cm x 20 cm		6858430	10	9629797	78,08 €
 <b>HydroTac<sup>®</sup> Comfort</b> Version adhésive	8 cm x 8 cm	3,5 x 3,5 cm	6858100	10	9629805	17,15 €
	12,5 cm x 12,5 cm	7,5 x 7,5 cm	6858150	10	9629811	41,06 €
	15 cm x 20 cm	9 x 14 cm	6858210	10	9629828	78,08 €

\*Remboursé LPPR dans la catégorie pansements hydrocellulaires et pour les indications : plaies aiguës sans distinction de phase, plaies chroniques en phase de bourgeonnement.

HydroTac<sup>®</sup> s'inscrit dans la gamme « soins des plaies » développée depuis plusieurs années par les Laboratoires PAUL HARTMANN.